



Neem 1 pen uit de koelkast en wacht 15 minuten.

1. VOORBEREIDEN

- Verwijder het papieren bescherm laagje,
- neem een naald, maar verwijder de naaldbescherm niet,
- schroef de naald op de pen zodat die goed vast zit,
- verwijder de naaldbescherm ook nu nog niet.

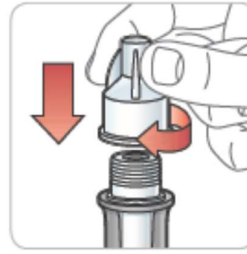

- Houd de pen rechtop en draai langzaam aan de knop onderaan de pen,
- stop met draaien zodra u een klik hoort, en het groene etiket niet meer zichtbaar is.

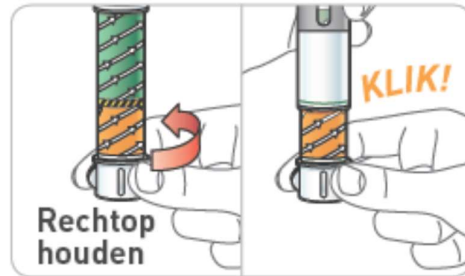


2. TIKKEN

- Houd de pen vast aan het oranje uiteinde en meng het poeder in de injectievloeistof in de pen, door de pen krachtig te tikken tegen uw handpalm,
- draai de pen elke keer na een paar tikken,
- het mengen duurt minstens 1 minuut.




- Controleer aan beide kanten door het mengvenster of de oplossing voor injectie goed gemengd is.

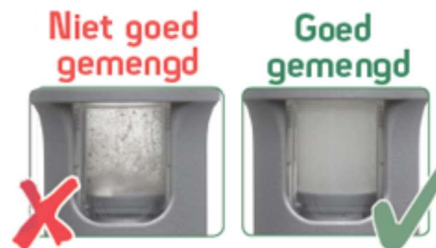

3. INJECTEREN

- Draai de knop tot het oranje etiket verdwenen is, zodat de injectieknop vrijkomt.

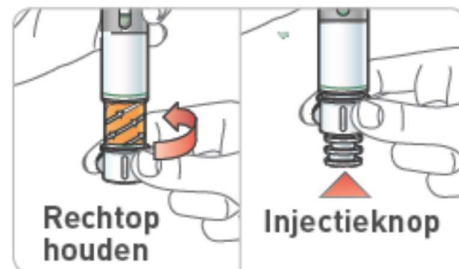

- Verwijder nu pas de naaldbescherm, door hem loodrecht van de pen af te trekken,
- plaats de naald in uw buik, dijbeen of de achterkant van uw bovenarm,
- druk de injectieknop in tot u een klik hoort,
- houd gedurende 10 seconden de pen vast, zodat zeker de volledige dosis geïnjecteerd wordt.

